

AVOVA Sperling Reha • AXKID Nextkid Recaro Monza CFX Reha




Adapterplatte (High-Tech Unterbau)

Montageanleitung – Zubehör



Adapter plate (high-tech base)

Assembly instructions – Accessory

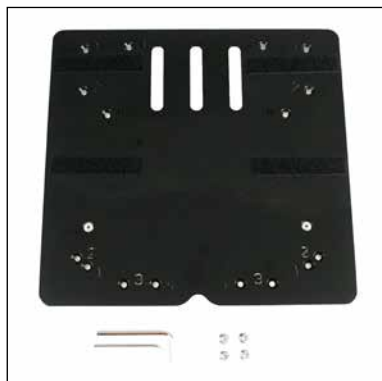

1



2




3 - Montagepunkte (2)
(Axxid NEXTKID Reha)



4 Montagepunkte (2)
(Recaro Monza CFX Reha)



5 Montagepunkte (4)
(AVOVA Sperling Reha)



Die Adapterplatte (Bild 1) bietet die Möglichkeit, umfangreiches Zubehör zu montieren:

- **Fußstützenaufnahme**
- **Fußstützenaufnahme mit Seatfix**
- **Drehplatte**
- **Neigungsplatte**
- **Dreh- und Neigungsplatte**
- **Sitztiefenverlängerung (nicht bei allen Reha-Kinder-Autositzen)**
- **Abduktionsführung, einstellbar (nicht bei allen Reha-Kinder-Autositzen)**

Die möglichen Kombinationen mit der Adapterplatte sind abhängig von ihrem Reha-Kinder-Autositz.

Welche Möglichkeiten Ihr Reha-Kinder-Autositz bietet, finden sie in der Gebrauchsanweisung ihres Reha-Kinder-Autositzes oder unter diesem Link: www.thomashilfen.de/produkt-gba



Tipp: Mit der Adapterplatte werden zwei Inbusschlüssel geliefert. (Bild 1) Der Inbusschlüssel Gr. 3 wird u. a. für die Montage der Adapterplatte benötigt. Der Inbusschlüssel Gr. 4 wird u. a. benötigt, wenn sie weiteres Zubehör wie z. B. die Fußstütze verwenden.

Montage der Adapterplatte am Reha-Kinder-Autositz

Legen Sie den Autositz auf den Rücken. Positionieren Sie die Adapterplatte vor den Gewindehülsen auf der Unterseite Ihres Reha-Kinder-Autositzes entsprechend der Bilder 3-5. Die Flauschstreifen liegen nicht am Sitz an! (Bild 2)

Schrauben Sie die Adapterplatte mit den Senkkopfschrauben fest an.

Einbau in Ihr Fahrzeug

Tipp: Vor der Montage in Ihrem Fahrzeug schieben Sie bitte den vorderen Fahrzeugsitz weit nach vorne. So haben Sie für die Montage mehr Platz im Fahrzeug.

Montieren Sie Ihren Reha-Kinder-Autositz mit der Adapterplatte in Ihrem Fahrzeug, wie in der Gebrauchsanweisung ihres Reha-Kinder-Autositzes beschrieben. Schieben Sie den Reha-Kinder-Autositz so dicht wie möglich zurück an die Rückenlehne Ihres Fahrzeugs. Der Reha-Kinder-Autositz muss möglichst viel Kontakt zur Rückenlehne Ihres Fahrzeugs haben.

Ausbau aus Ihrem Fahrzeug

Auch beim Ausbau aus Ihrem Fahrzeug folgen Sie bitte genau der Beschreibung in der Gebrauchsanweisung ihres Reha-Kinder-Autositzes.

Tipp: Bevor Sie Ihren Reha-Kinder-Autositz aus dem Fahrzeug nehmen, sollten die ISOFIX-Connectoren Ihres Reha-Kinder-Autositzes wieder unter den Sitz geschoben sein, um Beschädigungen am Fahrzeug zu vermeiden.

Demontage Adapterplatte

Nachdem Sie Ihren Reha-Kinder-Autositz aus ihrem Fahrzeug ausgebaut haben, legen sie ihn auf den Rücken, um die vier Schrauben der Adapterplatte zu lösen.

The adapter (Fig. 1) plate offers the option of mounting a wide range of accessories:

- **Adapter plate for footrest**
- **Adapter plate for footrest with seatfix**
- **Tilting base**
- **Swivel base**
- **Swivel and tilting base**
- **Seat depth extension (not for all rehab child car seats)**
- **Abduction block, adjustable (not for all rehab child car seats)**

The possible combinations with the adapter plate depend on your rehab child car seat.

You can find out what options your rehab child car seat offers in the instructions for use for your rehab child car seat or under this link: www.thomashilfen.com/product-instructions



Tip: Two Allen keys are supplied with the adapter plate (Fig. 2). The allen key size 3 is required for fitting the adapter plate, for example. The allen key size 4 is required, for example, if you are using other accessories such as the footrest.

Fitting the adapter plate to the rehab car seat

Place the car seat on its back. Position the adapter plate in front of the threaded sleeves on the underside of your rehab child car seat as shown in figure 3-5. The fleece strips do not lie against the seat! (Fig. 2)

Screw the adapter plate on tightly using the countersunk screws.

Installation in your vehicle

Tip: Before fitting in your vehicle, please push the front vehicle seat far forwards. This will give you more space in the vehicle for installation.

Install your rehab child car seat with the adapter plate in your vehicle as described in the user manual of your rehab child car seat. Push the rehab car seat as close as possible to the backrest of your vehicle. The rehab child car seat must have as much contact as possible with the backrest of your vehicle.

Removal from your vehicle

Please also follow the instructions in the user manual for your rehab car seat exactly when removing it from your vehicle.

Tip: Before you remove your rehab car seat from the vehicle, the ISOFIX connectors of your rehab child car seat should be pushed back under the seat to prevent damage to the vehicle.

Dismantling adapter plate

Once you have removed your rehab child car seat from your vehicle, lay it on its back to loosen the four screws on the adapter plate.



Mitglied in der Internationalen
Fördergemeinschaft für Kinder-
und Jugendrehabilitation e.V.



Thomashilfen

Thomas Hilfen für Körperbehinderte GmbH & Co. Medico KG · Walkmühlenstr. 1 · D - 27432 Bremervörde · Germany
Phone: +49 (0) 4761 8860 · Fax: +49 (0) 4761 886-19 · info@thomashilfen.de · www.thomashilfen.com