

AVOVA Sperling Reha • Axxid NEXTKID Reha Recaro Monza CFX Reha



Fußstützenaufnahme mit SEATFIX (High-Tech Unterbau)

Montageanleitung – Zubehör



Adapter plate for footrest with SEATFIX (high-tech base)

Assembly instructions – Accessory



1




2



3



4

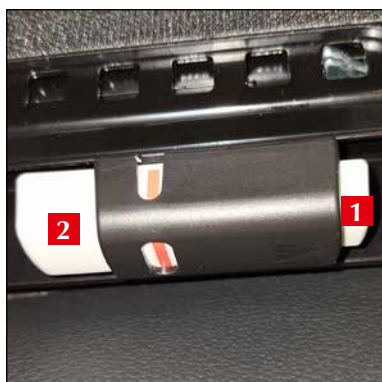

5



6



7



8



9



10



11



12

Dieser Fußstützenadapter (Bild 1) ist geeignet für Fahrzeuge, bei denen der untere ISOFIX-Ankerpunkt **nicht höher als 3 cm** über der Sitzfläche des Fahrzeugsitzes (Bild 2).

Bitte prüfen Sie in ihrem Fahrzeug das Maß vor dem Einbau.

Die Fußstützenaufnahme mit Seatfix kann nur in Verbindung mit einer Adapterplatte genutzt werden (Bild 3). Sie bietet zusätzliche Aufnahmen für weiteres Zubehör:

- **Fußstütze oder Stützfuß**

Welche Möglichkeiten Ihr Reha-Kinderautositz bietet, finden sie in der Gebrauchsanweisung ihres Reha-Kinderautositzes oder unter diesem Link: www.thomashilfen.de/produkt-gba



Montage des Fußstützenadapter mit SEATFIX im Fahrzeug

Stellen sie sicher, dass an ihrem Reha-Autositz eine Adapterplatte montiert ist (Bild 3)

Platzieren sie den Fußstützenadapter mit SEATFIX in Ihrem Fahrzeug vor den unteren ISOFIX-Ankerpunkten. (Bild 4). Ziehen Sie die beiden SEATFIX-Connectoren der Fußstützenaufnahme so weit wie möglich heraus, indem Sie zuerst den kleinen Knopf gedrückt halten und dann den großen Knopf gleichzeitig drücken (Bild 5+6).

Setzen Sie die Connectoren an den unteren Ankerpunkten an und verriegeln sie die Connectoren. Dabei ist ein deutliches "Klick" zu hören und die Anzeige wechselt von Rot auf Grün. (Bild 7 + 8)

Prüfen Sie an den Anzeigefenstern (Bild 8) auf beiden Seiten, ob die Connectoren korrekt verriegelt sind. Die Farbmarkierung ist nun "grün" und der Fußstützenadapter mit Seatfix lässt sich nicht mehr nach vorne wegziehen.

Achtung: Wenn sie in den Anzeigefenstern eine rote Markierung sehen, sind die Connectoren noch nicht korrekt verriegelt. Wenn sich die Fußstützenaufnahme mit Seatfix noch nach vorne wegziehen lässt, sind die Connectoren noch nicht korrekt verriegelt.

Montage Ihres Reha-Kinderautositzes auf dem Fußstützenadapter mit Seatfix

Tipp: Vor der Montage in Ihrem Fahrzeug schieben Sie bitte den vorderen Fahrzeugsitz weit nach vorne. So haben Sie für die Montage mehr Platz im Fahrzeug.

Nun platzieren Sie den Reha-Kinder-Autositz mittig auf dem Fußstützenadapter mit Seatfix. Nutzen Sie dafür die Kehle in der Adapterplatte (Bild 9) und den Anschlag in der Fußstützenaufnahme (Bild 10). Für eine sichere Verbindung drücken sie ihren Reha-Kinderautositz fest auf die Fußstützenaufnahme mit Seatfix.

Schieben Sie Ihren montierten Reha-Kinderautositz nun dicht wie möglich zurück an die Rückenlehne Ihres Fahrzeugs. Der Reha-Autositz muss möglichst viel Kontakt zur Rückenlehne Ihres Fahrzeugs haben.

Ausbau Ihres Reha-Kinderautositzes aus Ihrem Fahrzeug

Ist Ihr Reha-Kinderautositz mit einem Top Tether gesichert, lösen sie zuerst diese Verbindung. Ziehen Sie den Reha-Autositz am oberen Ende nach vorne. (Bild 11) Damit lösen Sie die Klettverbindung und können den Reha-Autositz aus ihrem Fahrzeug entfernen (Bild 12).

Demontage des Fußstützenadapters mit SEATFIX im Fahrzeug

Als nächstes lösen Sie einen Seatfix-Connector des Fußstützenadapters mit Seatfix, in dem Sie zuerst den kleinen Knopf gedrückt halten und dann den großen Knopf ebenfalls drücken (Bild 5). Nun schieben Sie den gelösten Connector in die Fußstützenaufnahme zurück. Anschließend lösen Sie die zweite Seite und schieben auch diesen Connector in die Fußstützenaufnahme zurück.

Nun kann der Fußstützenadapter mit Seatfix aus Ihrem Fahrzeug entfernt werden.

This footrest adapter (Fig. 1) is suitable for vehicles in which the lower ISOFIX anchor point is **no higher than 3 cm** above the seat surface of the vehicle seat (Fig. 2) from MA footrest adapter).

Please check the dimensions in your vehicle before installation.

The footrest holder with Seatfix can only be used in conjunction with an adapter plate (Fig. 3). It provides additional holders for other accessories:

- **Footrest or support foot**

You can find out what options your rehab child car seat offers in the instructions for use for your rehab child car seat or under this link: www.thomashilfen.com/product-instructions



Fitting the adapter plate for footrest with SEATFIX in the vehicle

Make sure that an adapter plate is fitted to your rehab car seat (Fig. 3)

Place the footrest adapter with SEATFIX in your vehicle in front of the lower ISOFIX anchor points. (Fig. 4). Pull out the two SEATFIX connectors of the footrest adapter as far as possible by first pressing and holding the small button and then pressing the large button at the same time (Fig. 5+6).

Place the connectors on the lower anchor points and lock the connectors. You will hear a clear „click“ and the display changes from red to green. (Fig. 7 + 8) with detail)

Check the indicator windows (Fig. 8) on both sides to ensure that the connectors are correctly locked. The colour marking is now „green“ and the footrest adapter with SEATFIX can no longer be pulled forwards.

Caution: If you see a red mark in the display windows, the connector are not yet correctly locked. If the footrest mount with SEATFIX can still be pulled forwards, the connectors are not yet correctly locked.

Mounting your rehab child car seat on the adapter plate for footrest with SEATFIX

Tip: Before fitting in your vehicle, please push the front vehicle seat far forwards. This will give you more space in the vehicle for installation.

Now place the rehab child car seat in the centre of the footrest adapter with Seatfix. To do this, use the groove in the adapter plate (Fig. 9) and the stop in the footrest holder (Fig. 10). For a secure connection, press your rehab car seat firmly onto the footrest adapter with Seatfix.

Now push your installed rehab child car seat as close as possible to the backrest of your vehicle. The rehab child car seat must have as much contact as possible with the backrest of your vehicle.

Removing your rehab child car seat from your vehicle

If your rehab car seat is secured with a top tether, release this connection first. Pull the top end of the rehab child car seat forwards. (Fig. 11) This will release the Velcro connection and you can remove the rehab car seat from your vehicle (Fig. 12).

Removing the Adapter plate for footrest with SEATFIX in the vehicle

Next, release a Seatfix connector of the footrest adapter with Seatfix by first pressing and holding the small button and then pressing the large button (Fig. 5). Now push the detached connector back into the footrest holder. Then release the second side and push this connector back into the footrest holder.

The footrest adapter with Seatfix can now be removed from your vehicle.



Mitglied in der Internationalen
Fördergemeinschaft für Kinder-
und Jugendrehabilitation e.V.



Thomashilfen

Thomas Hilfen für Körperbehinderte GmbH & Co. Medico KG · Walkmühlenstr. 1 · D - 27432 Bremervörde · Germany
Phone: +49 (0) 4761 8860 · Fax: +49 (0) 4761 886-19 · info@thomashilfen.de · www.thomashilfen.com