

AVOVA Sperling Reha • Axxkid NEXTKID Reha Recaro Monza CFX Reha



Fußstütze (High-Tech Unterbau)

Montageanleitung – Zubehör



Footrest (high-tech base)

Assembly instructions – Accessory




1



2



3

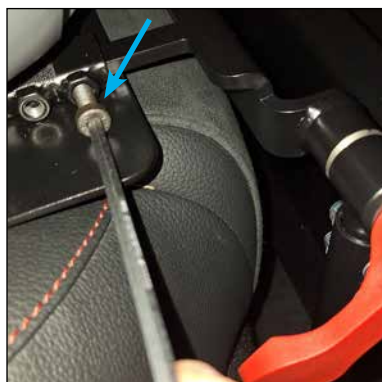

4



5



6



7





8a



8b



9



Diese Fußstütze (Bild 1) kann nur in Verbindung mit einer der folgenden Zubehör Kombinationen genutzt werden:

- **Adapterplatte + Fußstützenaufnahme**
- **Adapterplatte + Fußstützenaufnahme mit SEATFIX**
- **Adapterplatte + Neigungsplatte**
- **Adapterplatte + Drehplatte**
- **Adapterplatte + Dreh- und Neigungsplatte**

Welche Möglichkeiten Ihr Reha-Kinder-Autositz bietet, finden sie in der Gebrauchsanweisung ihres Reha-Kinder-Autositzes oder unter diesem Link: www.thomashilfen.de/produkt-gba



Sie benötigen für die Montage / Demontage die beiden Inbusschlüssel Größe 3 und Größe 4, die im Lieferumfang der Adapterplatte enthalten sind.

Montage der Fußstütze an ihrem Reha-Kinder-Autositz

Montieren Sie zunächst ihren Reha-Kinder-Autositz mit dem entsprechenden Zubehör in Ihrem Fahrzeug. Beachten Sie hierzu sowohl die Gebrauchsanweisung ihres Reha-Kinder-Autositzes als auch die Montageanleitung ihres Zubehörs.

Tipp: Lösen Sie den Exzenterhebel (Bild 2) und die Fußbank erst in Ihrem Fahrzeug, um die Führungsschienen in die Aufnahmen des Zubehörs zu schieben. So bleibt die Fußstütze handlich.

Schieben Sie die Führungsschienen in die Aufnahme vom Zubehör ihres Reha-Kinder-Autositz. (Bild 3)

Die Fußstütze sollte möglichst dicht an der Sitzkante ihres Fahrzeugsitzes platziert sein und möglichst senkrecht stehen. Schrauben Sie auf beiden Seiten je eine Schraube fest an, um die Fußstütze in der Position zu fixieren. (Bild 4) Nutzen Sie hierfür den Inbusschlüssel Größe 4.

Abstützung der Fußstütze im Fußraum

Drehen Sie als nächstes die Beine der Fußstütze so weit heraus, dass eine sichere Abstützung der im Fußraum entsteht. (Bild 5) Um die Länge zu fixieren wird die Mutter (Bild 6) gegen das untere Ende des Beines geschraubt.

Höhe der Fußbank

Klappen Sie die Fußbank herunter. Passen sie die Höhe der Fußbank an die Nutzergröße an. Lösen sie die Schrauben mit Hilfe des Inbusschlüssels Größe 3. (Bild 7) Positionieren Sie die Fußbank in der benötigten Höhe und ziehen sie die Schrauben wieder fest.

Die Fußbank kann für den Einstieg des Nutzers zusammen hochgeklappt werden. (Bild 8a+b)

Fixieren der Fußbank

Wenn Sie die Klappfunktion der Fußbank nicht nutzen möchten, können Sie die Fußbank mit Hilfe der Schraube und Mutter und einem 10er Maulschlüssel in dem 4-Kant-Loch der Fußbank fixieren (Bild 9).

Demontage Fußstütze

Lösen sie die zwei Schrauben an der Fußstützenaufnahme (Bild 3), um die Fußstütze wieder entfernen zu können.

Tipp: Die Fußstütze wird handlich, wenn Sie die Führungsschienen durch Lösen der Exzenterhebel (Bild 2) wieder herunterfalten. Ziehen sie die Exzenterhebel wieder fest an und klappen Sie die nun die Fußbank hoch, so dass der Magnet die Fußbank in Position hält.

This footrest (Fig. 1) can only be used in conjunction with one of the following accessories combination:

- **adapter plate + adapter plate for footrest**
- **adapter plate + adapter plate for footrest with seatfix**
- **adapter plate + tilting base**
- **adapter plate + swivel base**
- **adapter plate + swivel and tilting base**

You can find out what options your rehab child car seat offers in the instructions for use for your rehab child car seat or under this link: www.thomashilfen.com/product-instructions



You will need the two allen keys size 3 and size 4 included with the adapter plate for assembly/disassembly.

Mounting the footrest to your rehab child car seat

Firstly, install your rehab child car seat with the corresponding accessories in your vehicle. Follow both the instructions for use for your rehab child car seat and the installation instructions for your accessories.

Tip: First loosen the excenter lever (Fig. 2) and the footrest in your vehicle to slide the guide rails into the accessory holders. This keeps the footrest easy to handle.

Slide the guide rails into the holder of the accessories of your rehab child car seat. (Fig. 3)

The footrest should be positioned as close as possible to the edge of your vehicle seat and as vertically as possible. Tighten one screw on each side to fix the footrest in position. Use the size 4 allen key (Fig. 4) for this.

Contact surface for the footrest in the vehicle floor

Next, turn the legs of the footrest out far enough to create a secure contact surface in the vehicle floor. (Fig. 5) To fix the length, screw the nut (Fig. 6) against the lower end of the leg.

Height of the footrest

Fold down the footrest. Adjust the height of the footrest to the height of the user. Loosen the screws using the allen key size 3 (Fig. 7). Position the footrest at the required height and retighten the screws.

The footrest can be folded up for the user to get on. (Fig. 8)

Fixing the footrest

If you do not want to use the folding function of the footrest, you can fix the footrest in the 4-sided hole of the footrest using the screw and nut and a 10 mm open-end spanner (Fig. 9).

Disassembly the footrest

Loosen the two screws on the footrest holder (Fig. 3) to be able to remove the footrest again.

Tip: The footrest becomes easy to handel if you fold the guide rails down again by loosening the excenter levers (Fig. 2). Tighten the excenter levers again and fold up the footrest so that the magnet holds the footrest in position.



Mitglied in der Internationalen
Fördergemeinschaft für Kinder-
und Jugendrehabilitation e.V.



Thomas Hilfen für Körperbehinderte GmbH & Co. Medico KG · Walkmühlenstr. 1 · D - 27432 Bremervörde · Germany
Phone: +49 (0) 4761 8860 · Fax: +49 (0) 4761 886-19 · info@thomashilfen.de · www.thomashilfen.com