

AVOVA Sperling Reha • Axxkid NEXTKID Reha Recaro Monza CFX Reha



Stützfuß (High-Tech Unterbau)

Montageanleitung – Zubehör



Stand (High-tech base)

Assembly instructions – Accessory




1



2



3

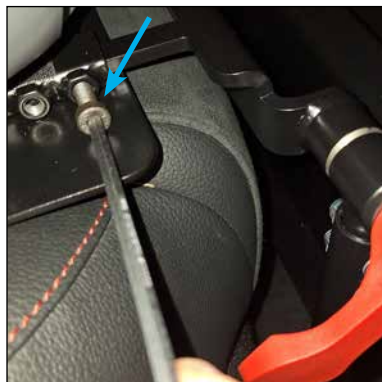

4



5



6

Dieser Stützfuß (Bild 1) **kann nur in Verbindung** mit einer der folgenden Zubehör Kombinationen genutzt werden:

- **Adapterplatte + Fußstützenaufnahme**
- **Adapterplatte + Fußstützenaufnahme mit Seatfix**
- **Adapterplatte + Neigungsplatte**
- **Adapterplatte + Drehplatte**
- **Adapterplatte + Dreh- und Neigungsplatte**

Welche Möglichkeiten Ihr Reha-Kinderautositz bietet, finden sie in der Gebrauchsanweisung ihres Reha-Kinderautositzes oder unter diesem Link: www.thomashilfen.de/produkt-gba



Sie benötigen für die Montage / Demontage den Inbusschlüssel Größe 4, der im Lieferumfang der Adapterplatte enthalten ist.

Montage des Stützfußes an ihrem Reha-Kinderautositz

Montieren Sie zunächst ihren Reha-Kinderautositz mit dem entsprechenden Zubehör in Ihrem Fahrzeug. Beachten Sie hierzu sowohl die Gebrauchsanweisung ihres Reha-Kinderautositzes als auch die Montageanleitung ihres Zubehörs.

Tipp: Lösen Sie den Exzenterhebel (Bild 2) erst in Ihrem Fahrzeug, um die Führungsschienen in die Aufnahmen des Zubehörs zu schieben. So bleibt der Stützfuß handlich.

Schieben Sie die Führungsschienen in die Aufnahme vom Zubehör ihres Reha-Kinderautositzes einschieben. (Bild 3)

Der Stützfuß sollte möglichst dicht an der Sitzkante ihres Fahrzeugsitzes platziert sein und möglichst senkrecht stehen. Schrauben Sie auf beiden Seiten je eine Schraube fest an, um den Stützfuß in der Position zu fixieren. (Bild 4) Nutzen Sie hierfür den Inbusschlüssel Größe 4.

Abstützung der Fußstütze im Fußraum

Drehen Sie als nächstes die Beine des Stützfußes so weit heraus, dass eine sichere Abstützung im Fußraum entsteht. (Bild 5) Um die Länge zu fixieren wird die Mutter (Bild 6) gegen das untere Ende des Beines geschraubt.

Demontage der Fußstütze

Lösen sie die zwei Schrauben an der Fußstützenaufnahme (Bild 3), um den Stützfuß wieder entfernen zu können.

Tipp: Der Stützfuß wird handlicher, wenn Sie die Führungsschienen durch Lösen der Exzenterhebel (Bild 2) wieder herunterfalten. Ziehen sie die Exzenterhebel wieder fest an.

This support leg (Fig. 1) can only be used in conjunction with one of the following accessories combination:

- **adapter plate + adapter plate for footrest**
- **adapter plate + adapter plate for footrest with seatfix**
- **adapter plate + tilting base**
- **adapter plate + swivel base**
- **adapter plate + swivel and tilting base**

You can find out what options your rehab child car seat offers in the instructions for use for your rehab child car seat or under this link: www.thomashilfen.com/product-instructions



You will need the allen key size 4 included with the adapter plate for assembly/disassembly.

Fitting the stand to your rehab child car seat

Firstly, install your rehab child car seat with the corresponding accessories in your vehicle. Follow both the instructions for use for your rehab child car seat and the installation instructions for your accessories.

Tip: First loosen the excenter lever (Fig. 2) in your vehicle to slide the guide rails into the accessory holders. This keeps the support leg easy to use.

Slide the guide rails into the holder of the accessories of your rehab child car seat. (Fig. 3)

The stand should be positioned as close as possible to the edge of your vehicle seat and as vertically as possible. Tighten one screw on each side to fix the support leg in position. (Fig. 4) Use the allen key size 4 for this.

Support for the stand in the foot space

Next, turn the legs of the stand out far enough to create a secure support in the foot space. (Fig. 5) To fix the length, screw the nut (Fig. 6) against the lower end of the leg.

Dismantling the footrest

Loosen the two screws on the footrest holder (Fig. 3) to be able to remove the support leg again.

Tip: The support leg becomes easy to use if you fold the guide rails down again by loosening the excenter levers (Fig. 2). Tighten the eccentric levers again.



Mitglied in der Internationalen
Fördergemeinschaft für Kinder-
und Jugendrehabilitation e.V.



Thomas Hilfen für Körperbehinderte GmbH & Co. Medico KG · Walkmühlenstr. 1 · D - 27432 Bremervörde · Germany
Phone: +49 (0) 4761 8860 · Fax: +49 (0) 4761 886-19 · info@thomashilfen.de · www.thomashilfen.com