

AVOVA Sperling Reha • Axxid NEXTKID Reha Recaro Monza CFX Reha



Sitztiefenverlängerung (High-Tech Unterbau)

Montageanleitung – Zubehör



Seat depth extension (High-tech base)

Assembly instructions – Accessory



1



2




3



4



5



6

Die Sitztiefenverlängerung (Bild 1) **kann nur in Verbindung mit einer Adapterplatte** (Bild 2) bei den folgenden Reha-Autositzen genutzt werden:

- **Axkid Nextkid Reha-Kinder-Autositz**
- **Recaro Monza CFX Reha-Kinder-Autositz**

Welche Möglichkeiten Ihr Reha-Kinder-Autositz bietet, finden sie in der Gebrauchsanweisung ihres Reha-Kinder-Autositzes oder unter diesem Link: www.thomashilfen.de/produkt-gba



Sie benötigen für die Montage / Demontage den Inbusschlüssel Größe 3, der im Lieferumfang der Adapterplatte enthalten ist.

Montage der Sitztiefenverlängerung an ihrem Reha-Kinder-Autositz

Schieben Sie den Winkel zwischen Ihren Reha-Kinder-Autositz und der Adapterplatte (Bild 3). Verschrauben Sie den Winkel von unten mit den 4 Scheiben und 4 Schrauben. (Bild 4)

Über die Langlöcher können sie die Sitztiefe auf die Bedürfnisse Ihres Kindes abstimmen.


Tipp: Nutzen Sie neben der Sitztiefenverlängerung auch die Abduktionsführung, dann müssen Sie den Bezug der Sitztiefenverlängerung zur Seite drücken, um für die Abduktionsführung freien Zugang zur 4-Kant-Aufnahme zu bekommen. (Bild 5)

Demontage der Abduktionsführung aus Ihrem Reha-Kinder-Autositz

Lösen Sie die zwei Schrauben mit dem Inbusschlüssen Größe 3 an der Adapterplatte, um den Winkel mit der Abduktionsführung zu entfernen.

Reinigung

Der Bezug der Sitztiefenverlängerung ist leicht abnehmbar, nachdem Sie den Klettverschluss geöffnet haben. Beachten Sie die folgenden Waschsymbole für die Reinigung des Bezuges:

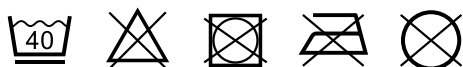

Der Bezug der Sitztiefenverlängerung ist leicht abnehmbar, nachdem Sie den Klettverschluss geöffnet haben. Beachten Sie die folgenden Waschsymbole für die Reinigung des Bezuges:

The seat depth extension **can only be used in conjunction with an adapter plate** (Fig. 2) for the following rehab car seats:

- **Axkid Nextkid Reha** - child car seat
- **Recaro Monza CFX Reha** - child car seat

You can find out what options your rehab child car seat offers in the instructions for use for your rehab child car seat or under this link: www.thomashilfen.com/product-instructions



You will need the size 3 Allen key included with the adapter plate for assembly/disassembly.

Fitting the seat depth extension to your rehab child car seat

Slide the bracket between your rehab child car seat and the adapter plate (Fig. 3). Screw the bracket from below with the 4 washers and 4 screws. (Fig. 4)

The elongated holes allow you to adjust the seat depth to your child's needs.


Tip: If you also use the abduction guide in addition to the seat depth extension, you must push the cover of the seat depth extension to the side in order to gain free access to the square support for the abduction guide. (Image 5)

Removing the seat depth extension

Loosen the four screws with the Allen key size 3 on the adapter plate to remove the seat depth extension.

Cleaning

The cover of the seat depth extension is easy to remove once you have opened the Velcro fastener. Please note the following washing symbols for cleaning the cover:

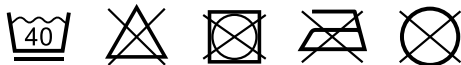

To maintain the functionality of the Velcro fasteners, brush the Velcro straps with a brush from time to time. Always close or cover the Velcro fasteners when washing.



Mitglied in der Internationalen
Fördergemeinschaft für Kinder-
und Jugendrehabilitation e.V.



Thomashilfen

Thomas Hilfen für Körperbehinderte GmbH & Co. Medico KG · Walkmühlenstr. 1 · D - 27432 Bremervörde · Germany
Phone: +49 (0) 4761 8860 · Fax: +49 (0) 4761 886-19 · info@thomashilfen.de · www.thomashilfen.com