

AVOVA Sperling Reha • Axxid NEXTKID Reha Recaro Monza CFX Reha



Dreh- und Neigungsplatte (High-Tech Unterbau)

Montageanleitung – Zubehör



Swivel and tilting base (High-tech base)

Assembly instructions – Accessory



1




2




3




4

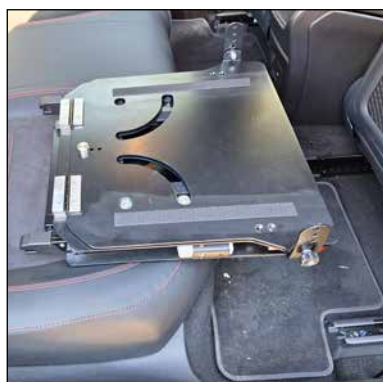

5

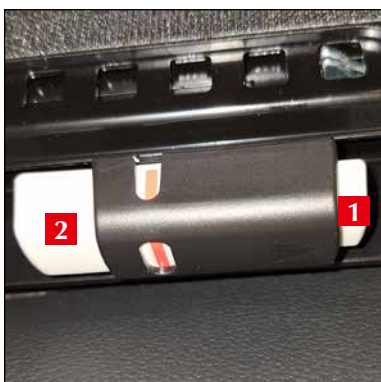

6

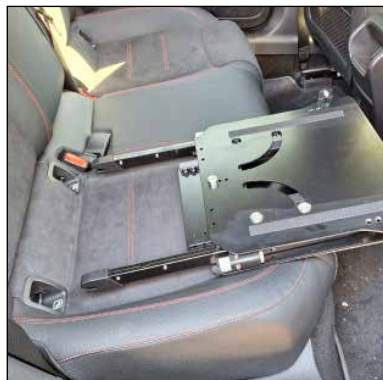

7



8



9



10



11



12



13




14




15



16



17



18

Diese Dreh- und Neigungsplatte (Bild 1) kann nur in Verbindung mit einer Adapterplatte (Bild 2) genutzt werden.

Sie bietet zusätzliche Aufnahmen für weiteres Zubehör:

- **Fußstütze oder Stützfuß**
- **Stabilisierungsbügel**

Welche Möglichkeiten Ihr Reha-Kinderautositz bietet, finden sie in der Gebrauchsanweisung ihres Reha-Kinderautositzes oder unter diesem Link: www.thomashilfen.de/produkt-gba



Montage der Dreh- und Neigungsplatte in ihrem Fahrzeug

Stellen sie sicher, dass an ihrem Reha-Autositz eine Adapterplatte montiert ist (Bild 3) Prüfen Sie die Sitzfläche in ihrem Fahrzeug, auf dem Sie ihren Reha-Kinder-Autositz montieren möchten. Wenn Sie die Sitzmodule tiefer als 2 cm (Bild 4) empfehlen wir das Kissen für die Drehplatten, um ihren Fahrzeugsitz zu schützen. Das Kissen für die Drehplatte ist ebenfalls sinnvoll, wenn Sie weiche Fahrzeugsitze in Fahrzeug haben.

Platzieren sie die Dreh- und Neigungsplatte (Bild 1) in ihrem Fahrzeug auf dem Fahrzeugsitz vor den unteren Ankerpunkten (Bild 5). Ziehen Sie die beiden SEATFIX-Connectoren der Dreh- und Neigungsplatte so weit wie möglich heraus, indem Sie zuerst den kleinen Knopf gedrückt halten und dann den großen Knopf gleichzeitig drücken (Bild 6 + 7).

Setzen Sie die Connectoren an den unteren Ankerpunkten an und verriegeln sie die Connectoren. Dabei ist ein deutliches "Klick" zu hören. (Bild 8)

Prüfen Sie an den Anzeigefenstern auf beiden Seiten, ob die Connectoren korrekt verriegelt sind. Die Farbmarkierung ist nun "grün" (Bild 9) und der Reha-Autositz lässt sich nicht mehr nach vorne wegziehen.

Achtung: Wenn sie in den Anzeigefenstern eine rote Markierung sehen, ist der Connector noch nicht korrekt verriegelt. Wenn sich die Dreh- und Neigungsplatte noch nach vorne wegziehen lässt, sind die Connectoren noch nicht korrekt verriegelt.

Einbau ihres Reha-Kinderautositzes

Nun platzieren Sie den Reha-Kinder Autositz mittig auf der Dreh- und Neigungsplatte. Nutzen Sie dafür die Kehle in der Adapterplatte (Bild 8) und den Anschlag in der Dreh- und Neigungsplatte (Bild 9) Für eine sichere Verbindung drücken sie ihren Reha-Kinderautositz fest auf die Dreh- und Neigungsplatte.

Schieben Sie den Reha-Autositz nun so dicht wie möglich zurück an die Rückenlehne Ihres Fahrzeugs. Der Reha-Kinder-Autositz muss möglichst viel Kontakt zur Rückenlehne Ihres Fahrzeugs haben.

Drehfunktion Ihres Reha-Kinder-Autositzes

Die Drehfunktion erleichtert ihnen das Hineinsetzen ebenso wie das Herausnehmen Ihres Kindes aus dem Reha-Kinder-Autositz. Drücken Sie den Auslöser (Bild 12), um ihren Reha-Kinder-Autositz zur Türöffnung zu drehen. (Bild 13)

Drehen Sie Ihren Reha-Kinder-Autositz einfach wieder zurück in die Ausgangsposition. Der Reha-Kinderautositz verriegelt dabei automatisch.

Neigungsfunktion Ihres Reha-Kinder-Autositzes

Um die Neigungsfunktion zu ändern, lösen Sie die beiden Rändelschrauben (Bild 14), und fixieren sie in der neuen Position (Bild 15).

Dafür kann es ggf. erforderlich sein, die Connectoren zu lösen und die Neigungsplatte etwas nach vorne zu ziehen. Arretieren Sie nun die Connectoren wieder (Prüfen Sie die korrekte Verriegelung, wie oben beschrieben). Wenn Sie die richtige Position eingestellt haben, schieben Sie die Dreh- und Neigungsplatte wieder so dicht wie möglich zurück an die Rückenlehne.

Ausbau Ihres Reha-Kinderautositzes

Als erstes stellen Sie die Neigungsfunktion auf 0° ein (Bild 14). Ziehen Sie Ihren Reha-Kinder-Autositz oben an der Rückenlehne nach vorne (Bild 12). So lösen Sie die Verbindung ihres Reha-Kinder-Autositzes von der Dreh- und Neigungsplatte und können ihren Reha-Kinder-Autositz aus Ihrem Fahrzeug entfernen.

Demontage der Dreh- und Neigungsplatte aus Ihrem Fahrzeug

Als nächstes lösen Sie einen SEATFIX-Connector, in dem Sie zuerst den kleinen Knopf gedrückt halten und dann den großen Knopf gleichzeitig drücken. (Bilder 6) Schieben Sie den Connector anschließend in die Dreh- und Neigungsplatte zurück. Anschließend lösen Sie die zweite Seite.

Nun kann die Dreh- und Neigungsplatte aus Ihrem Fahrzeug entfernt werden

This turn and tilt plate (Fig. 1) can only be used in conjunction with an adapter plate (Fig. 2).

It offers additional holders for further accessories:

- **Footrest or support foot**
- **Stabilizing bow**

You can find out what options your rehab child car seat offers in the user manual for use for your rehab child car seat or under this link: www.thomashilfen.com/product-instructions



Mounting the swivel and tilting base in your vehicle

Make sure that an adapter plate is fitted to your rehab car seat (Fig. 3). Check the seat surface in the vehicle on which you wish to fit your rehab child car seat. If the seat modules are lower than 2 cm (Fig. 4), we recommend the cushion for the swivel plates to protect your vehicle seat. The cushion for the swivel plate is also useful if you have soft vehicle seats in your vehicle.

Place the swivel and tilt plate (Fig. 2) in your vehicle on the vehicle seat in front of the lower anchor points (Fig. 3). Pull out the two SEATFIX connectors of the swivel and tilt plate as far as possible by first pressing and holding the small button and then pressing the large button simultaneously (Fig. 4+5).

Place the connectors on the lower anchor points and lock the connectors. You will hear a clear „click“. (Fig. 8)

Check the indicator windows on both sides to ensure that the connectors are correctly locked. The colour marking is now „green“ (Fig. 9) and the rehab car seat can no longer be pulled forwards.

Caution: If you see a red mark in the display windows, the connector is not yet correctly locked. If the turn and tilt plate can still be pulled forwards, the connectors are not yet correctly locked.

Installation of your rehab child car seat

Now place the rehab child car seat in the centre of the swivel and tilting base. To do this, use the groove in the adapter plate (Fig. 10) and the stop in the Swivel and tilting base (Fig. 11) To ensure a secure connection, press your rehab car seat firmly onto the swivel and tilt plate.

Now push the rehab child car seat as close as possible to the backrest of your vehicle. The rehab car seat must have as much contact as possible with the backrest of your vehicle.

Swivel function of your rehab child car seat

The swivel function makes it easier for you to put your child in and take them out of the rehab car seat. Press the release button (Fig. 12) to turn your rehab child car seat towards the door opening. (Image 13)

Simply turn your rehab child car seat back to the starting position. The rehab child car seat locks automatically.

Reclining function of your rehab child car seat

To change the tilt function, loosen the two knurled screws (Fig. 14) and fix them in the new position (Fig. 15).

To do this, it may be necessary to loosen the connectors and pull the tilt plate forwards slightly. Now lock the connectors again (check that they are locked correctly as described above). Once you have set the correct position, push the Swivel and tilting base back as close as possible to the backrest.

Removing your rehab child car seat

Firstly, set the tilt function to 0° (Fig. 14). Pull your rehab child car seat forwards at the top of the backrest (Fig. 12). This will release the connection of your rehab child car seat from the Swivel and tilting base and you can remove your rehab child car seat from your vehicle.

Removing the turntable and tilt plate from your vehicle

Next, release a SEATFIX connector by first pressing and holding the small button and then pressing the large button at the same time. (Fig. 6) Then push the connector back into the swivel and tilting base. Then release the second side.

The turn and tilt plate can now be removed from your vehicle.



Mitglied in der Internationalen
Fördergemeinschaft für Kinder-
und Jugendrehabilitation e.V.



Thomas Hilfen für Körperbehinderte GmbH & Co. Medico KG · Walkmühlenstr. 1 · D - 27432 Bremervörde · Germany
Phone: +49 (0) 4761 8860 · Fax: +49 (0) 4761 886-19 · info@thomashilfen.de · www.thomashilfen.com