

AVOVA Sperling Reha • Axxid NEXTKID Reha Recaro Monza CFX Reha



Neigungsplatte (High-Tech Unterbau)

Montageanleitung – Zubehör



Tilting base (high-tech base)


Assembly instructions – Accessory




1



2

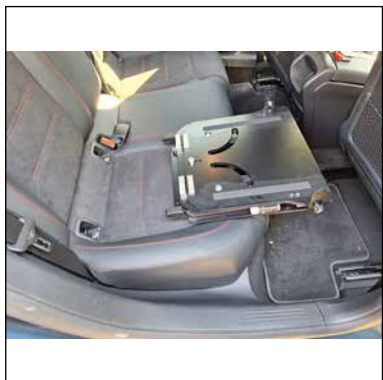

3

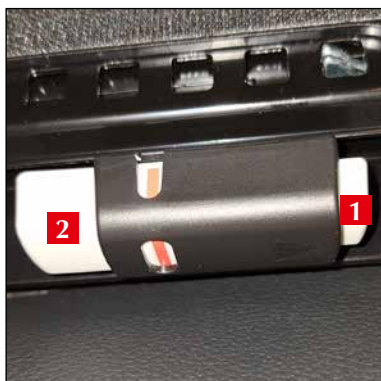

4



5



6



7



8



9



10



11



12

Diese Neigungsplatte (Bild 1) kann nur in Verbindung mit einer Adapterplatte genutzt werden. (Bild 2)

Sie bietet zusätzliche Aufnahmen für weiteres Zubehör:

- **Fußstütze oder Stützfuß**
- **Stabilisierungsbügel**

Welche Möglichkeiten Ihr Reha-Kinderautositz bietet, finden sie in der Gebrauchsanweisung ihres Reha-Kinderautositzes oder unter diesem Link: www.thomashilfen.de/produkt-gba



Montage der Neigungsplatte in ihrem Fahrzeug

Stellen sie sicher, dass an ihrem Reha-Kinder-Autositz eine Adapterplatte montiert ist (Bild 2)

Platzieren Sie die Neigungsplatte (Bild 1) in ihrem Fahrzeug vor den unteren ISOFIX-Ankerpunkten. (Bild 3). Ziehen Sie die beiden SEATFIX-Connectoren der Neigungsplatte so weit wie möglich heraus, indem Sie zuerst den kleinen Knopf gedrückt halten und dann den großen Knopf drücken. (Bild 4 + 5).

Setzen Sie die Connectoren an den unteren Ankerpunkten an und verriegeln sie die Connectoren. Dabei ist ein deutliches "Klick" zu hören und die Anzeige wechselt von Rot auf Grün. (Bild 6 + 7)

Prüfen Sie an den Anzeigefenstern (Bild 7) auf beiden Seiten, ob die Connectoren korrekt verriegelt sind. Die Farbmarkierung ist nun "grün" und der Fußstützenadapter mit SEATFIX lässt sich nicht mehr nach vorne wegziehen.

Achtung: Wenn sie in den Anzeigefenstern eine rote Markierung sehen, ist der Connector noch nicht korrekt verriegelt. Wenn sich die Neigungsplatte noch nach vorne wegziehen lässt, sind die Connectoren noch nicht korrekt verriegelt.

Einbau ihres Reha-Kinderautositzes

Tipp: Vor der Montage in Ihrem Fahrzeug schieben Sie bitte den vorderen Fahrzeugsitz weit nach vorne. So haben Sie für die Montage mehr Platz im Fahrzeug.

Nun platzieren Sie Ihren Reha-Kinder-Autositz mittig auf der Neigungsplatte. Nutzen Sie dafür die Ausschnitt in der Adapterplatte (Bild 8) und den Anschlag der Neigungsplatte (Bild 9). Für eine sichere Verbindung drücken sie ihren Reha-Kinderautositz fest auf die Neigungsplatte.

Schieben Sie die Neigungsplatte nun so dicht wie möglich zurück an die Rückenlehne Ihres Fahrzeugs.

Der Reha-Kinder-Autositz muss möglichst viel Kontakt zur Rückenlehne Ihres Fahrzeugs haben, eingestellten Neigung abhängig.

Ändern der Neigungsfunktion

Um die Neigungsfunktion zu ändern, lösen Sie die beiden Sterngriffschrauben (Bild 10). Heben Sie die Platte in die neue Position und fixieren Sie die Platte mit den beiden Sterngriffschrauben (Bild 11).

Dafür kann es ggf. erforderlich sein, die Connectoren zu lösen und die Neigungsplatte etwas nach vorne zu ziehen. Arretieren Sie nun die Connectoren wieder, achten Sie dabei auf das "Klick"-Geräusch und auf die grünen Markierungen. Schieben Sie nun die Neigungsplatte wieder so dicht wie möglich zurück an die Rückenlehne.

Ausbau Ihres Reha-Kinderautositzes aus Ihrem Fahrzeug

Als erstes stellen Sie die Neigungsfunktion auf 0° ein (Bild 10)

Wenn Ihr Reha-Kinderautositz mit einem Top Tether gesichert ist, lösen sie diese Verbindung. Lösen Sie zunächst die Klettverbindung von Ihrem Reha-Kinder-Autositz und der Neigungsplatte.

Ziehen Sie Ihren Reha-Kinderautositz oben an der Rückenlehne nach vorne. (Bild 12) So lösen Sie die Verbindung ihres Reha-Kinderautositzes von der Neigungsplatte und können ihren Reha-Kinderautositz aus Ihrem Fahrzeug entfernen.

Demontage der Neigungsplatte aus in ihrem Fahrzeug

Als nächstes lösen Sie einen SEATFIX-Connector der Neigungsplatte, in dem Sie zuerst den kleinen Knopf gedrückt halten und dann den großen Knopf ebenfalls drücken (Bild 4). Nun schieben Sie den gelösten Connector in die Neigungsplatte zurück. Anschließend lösen Sie die zweite Seite und schieben auch diesen Connector in die Neigungsplatte zurück.

Nun kann die Neigungsplatte aus Ihrem Fahrzeug entfernt werden.

This inclination plate (Fig. 1) can only be used in conjunction with an adapter plate. (Fig. 2)

It offers additional holders for further accessories:

- **Footrest or support foot**
- **Stabilizing bow**

You can find out what options your rehab child car seat offers in the instructions for use for your rehab child car seat or under this link: www.thomashilfen.com/product-instructions



Mounting the tilting base in your vehicle

Make sure that an adapter plate is fitted to your rehab child car seat (Fig. 2)

Place the tilting base (Fig. 3) in your vehicle in front of the lower ISOFIX anchor points. (Image 3). Pull out the two SEATFIX connectors of the adapter plate as far as possible by first pressing and holding the small button and then pressing the large button. (Fig. 4 + 5).

Place the connectors on the lower anchor points and lock the connectors. You will hear a clear „click“ and the display changes from red to green. (Fig. 6+7)

Check the indicator windows (Fig. 7) on both sides to ensure that the connectors are correctly locked. The colour marking is now „green“ and the Adapter plate with Seatfix can no longer be pulled forwards.

Caution: If you see a red mark in the display windows, the connector is not correctly locked yet. If the footrest mount with SEATFIX can still be pulled tilting base forwards, the connectors are not correctly locked yet.

Installation of your rehab child car seat

Tip: Before fitting in your vehicle, please push the front vehicle seat far forwards. This will give you more space in the vehicle for installation.

Now place your rehab child car seat in the centre of the tilting base. To do this, use the cut out in the adapter plate (Fig. 8) and the limit stop in the reclining plate (Fig. 9) To ensure a secure connection, press your rehab child car seat firmly onto the tilting base.

Now push the tilting base as close as possible to the backrest of your vehicle.

The rehab child car seat must have as much contact as possible with the backrest of your vehicle.

Changing the tilting function

To change the tilting function, loosen the two star knob screws (Fig. 10). Lift the plate into the new position and secure the plate with the two star knob screws (Fig. 11).

To do this, it may be necessary to loosen the connectors and pull the tilting base forwards slightly. Now lock the connectors again, paying attention to the „click“ sound and the green markings. Now push the tilting base back as close as possible to the backrest.

Removing your rehab child car seat from your vehicle

Firstly, set the tilting function to 0° (Fig. 10)

If your rehab child car seat is secured with a top tether, release this connection.

Pull your rehab child car seat forwards at the top of the backrest. (Fig. 12) This will release the connection of your rehab child car seat from the tilting plate and you can remove your rehab child car seat from your vehicle.

Removing the tilting base from your vehicle

Next, release a SEATFIXconnector on the tilt plate by first pressing and holding the small button and then pressing the large button (Fig. 4). Now push the loosened connector back into the tilting plate. Then release the second side and push this connector back into the tilting plate as well.

Now the tilting base can be removed from your vehicle.



Mitglied in der Internationalen
Fördergemeinschaft für Kinder-
und Jugendrehabilitation e.V.



Thomashilfen

Thomas Hilfen für Körperbehinderte GmbH & Co. Medico KG · Walkmühlenstr. 1 · D - 27432 Bremervörde · Germany
Phone: +49 (0) 4761 8860 · Fax: +49 (0) 4761 886-19 · info@thomashilfen.de · www.thomashilfen.com